


Dräger DrugCheck® 3000 Huumeselontaratkaisut

Dräger DrugCheck® 3000 ilmaisee muutamassa minuutissa, onko henkilö käyttänyt huumeaineita. Kompakti ja nopea syljestä otettava huume testi antaa luotettavan tuloksen helposti ja edullisesti. Laite toimii ilman sähköä, joten sitä voidaan käyttää missä tahansa.

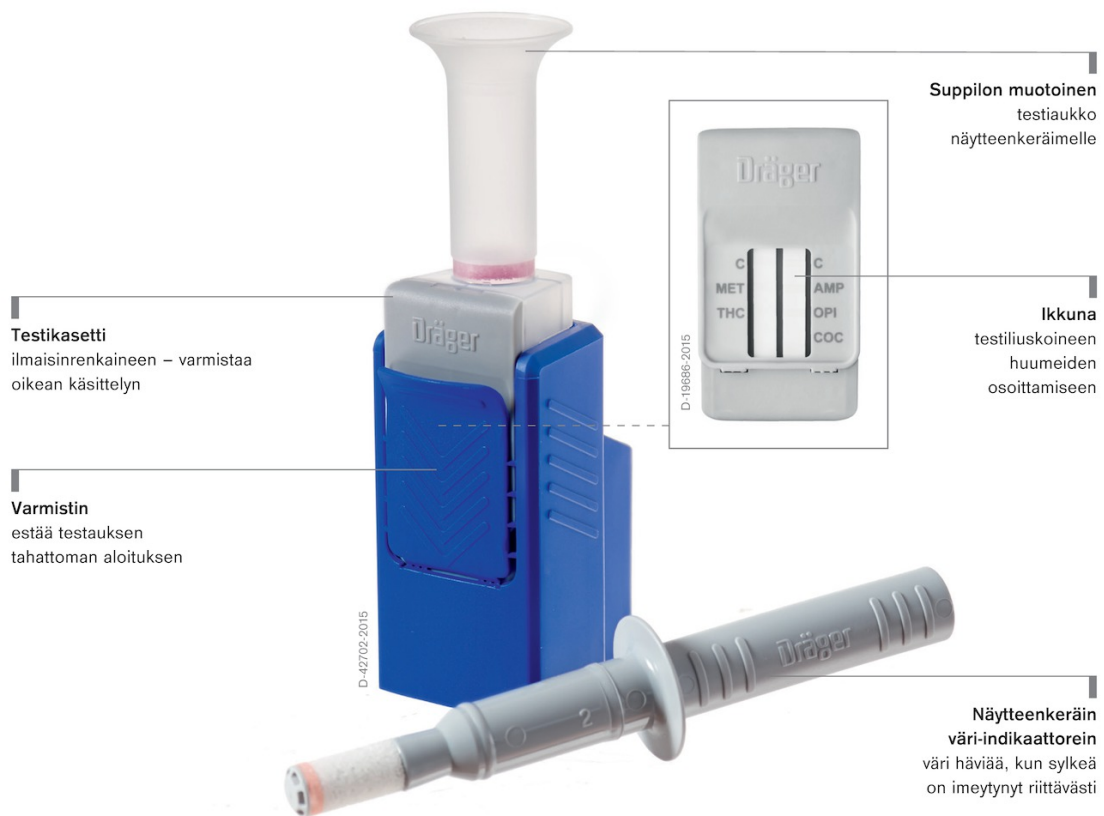

Edut

Helppo ja turvallinen näytteenotto

Dräger DrugCheck 3000 koostuu kahdesta osasta: näytteenkeräimestä sylkinäytteen ottoa varten ja testikasetista näytteen analysointiin. Puskuriliuosta sisältävässä testikasetissa on ikkuna, jonka kahteen testiliuskaan kontrolli- ja testiviivat ilmestyvät. Testissä on kolme helppoa vaihetta: Kerää sylkinäyte, ravista testisarjaa ja aloita testaus lyhyen inkubaatioajan jälkeen. Keräimen päässä olevan indikaattorin väri häviää, kun näytettä on kerätty riittävästi.

Tulos voidaan lukea heti, kun kontrolliviivat tulevat näkyviin. Testitulokset on negatiivinen, mikäli testiliuskaan jokaisen aineryhmän (huumeen) kohdalle ilmestyy viiva. Näyte ei tällöin sisällä tutkittuja aineita. Mikäli jonkin aineryhmän kohdalle ei ilmestyy viivaa, tulos on kyseisen aineen osalta positiivinen.

Nopea ja herkkä analyysi

Dräger DrugCheck 3000 tunnistaa samanaikaisesti jopa viisi huumausaineryhmää: kokaiini, opiaatit, amfetamiini, metamfetamiini/design-huumeet (esim. ekstaasi) ja kannabis (THC). Näistä aineryhmistä kannabis on yleisimmin käytetty ja kaikista yhdisteistä (THC) lisäksi myös vaikein tunnistaa. Tästä syystä Dräger DrugCheck 3000 on optimoitu THC:n seulontaan ja valittavissa on nyt kaksi erilaista testausvaihtoehtoa: valitusta testin odotusajasta (inkubaatioaika) riippuen nopea testi, jossa THC:n raja-arvo on korkea ja herkkä testi, jossa THC:n raja-arvo on matala. Koko testi kestää vain 3–5 minuuttia.

Yksiselitteinen huume testi seulontaan paikan päällä

Kompakti DrugCheck 3000 kulkee kätevästi mukana. Sen saa helposti ja nopeasti käyttövalmiiksi ja se soveltuu joustavasti erilaisiin käyttökohteisiin, kuten liikennevalvontaan ja työpaikoilla* turvallisuussyistä suoritettavaan huume testaukseen. Testisarjassa ei ole sähköisiä osia, joten se on turvallinen myös vaarallisilla alueilla.

Muita etuja

Drägerillä on vuosikymmenien kokemus alkoholin mittauslaitteista ja huumeiden seulontamenetelmistä. DrugCheck 3000:ssa on hyödynnetty hyväksi havaitun Dräger DrugTest® 5000-järjestelmän toimintaperiaatetta: sillä voidaan todeta luotettavasti pienetkin THC-jäämät. Kertakäyttöinen DrugCheck 3000 -testisarja on hygieeninen eikä sitä voi manipuloida.

*DrugCheck® 3000 -testisarjaa myydään USA:ssa vain viranomaiskäyttöön.

Liittyvät tuotteet



D-54720-2012

Dräger DrugTest® 5000

Ei pipetointia, ei pisarointia, ei ajanottoa: Dräger DrugTest® 5000:lla näytteenotto on nopeaa ja helppoa. Kerätty näyte voidaan analysoida välittömästi ja tarkasti paikan päällä.



D-60986-2009

Dräger SSK 5000

Dräger SSK 5000 on nopea ja helppokäyttöinen menetelmä näytteen keräämiseen pinnoilta huumeanalyysiä varten. Dräger DrugTest® 5000 -laitteen kanssa käytettäessä näyte siirretään testikasettiin ja huumausaine todetaan analysaattorilla. Näyte voidaan myös säilyttää ja lähettää analysoitavaksi.



ST-19226-2007

Dräger DCD 5000

Yksinkertainen, nopea ja turvallinen päihteiden ja huumeiden tunnistus: Dräger DCD 5000 mahdollistaa sylkinäytteen helpon keräämisen ja näytteen säilytyksen ja lähettämisen laboratorioon analysoitavaksi – pilaantumiselta suojattuna.



D-4347-2014

Dräger SCK

Näytteen vahvistusta varten on saatavilla validointisarja, johon kuuluu sylkinäytteen keräin lisänäytteelle laboratorioanalyysiä varten sekä lähetyspakkaus.

Tekniset tiedot

Testi huumausaineiden toteamiseen sylkinäytteestä

Mitat (L x K x S)	32 x 111 x 57 mm 1,26 x 4,37 x 2,24 tuumaa
Paino	< 30 g (0,07 lb)
Käyttöalue	Käyttö: 5 °C – 40 °C (32 °F – 86 °F) ja suhteellinen kosteus 5 % – 95 %
Säilytys / kuljetus	4 °C – 25 °C (39 °F – 77 °F)
Mittauksen kesto	Nopea mittaus: analyysi < 3 minuuttia Herkkä mittaus: analyysi < 5 minuuttia
Mittaustavan valinta	Valitusta inkubaatioajasta ja THC:n raja-arvosta riippuen nopea tai herkempi mittaus.
Luvat / Standardit	Hyväksytty EU:n sisällä lääkinnällisenä tuotteena direktiivin 98/79/EY mukaisesti (in vitro -diagnostiikkaan (IVD) tarkoitetut lääkinnälliset laitteet). Euroopan unionin ulkopuolella vain oikeuslääketieteelliseen käyttöön (Non-IVD) (vain Yhdysvallat).

Dräger DrugCheck® 3000	Kuvaus	Tilausno
Testi huumausaineiden toteamiseen sylkinäytteestä		
Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 IVD	20 sarjan pakkaus	83 25 500
Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 Non-IVD	20 sarjan pakkaus	83 25 580
Dräger DrugCheck® 3000 havaitsee seuraavat aineet		
<ul style="list-style-type: none"> - Kokaiini (COC) - Opiatit (OPI) - Kannabis (THC) - Amfetamiini (AMP) - Metamfetamiini (MET) 		

CORPORATE HEADQUARTERS

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

DANMARK

Dräger Safety Danmark A/S
Lyskær 9
2730 Herlev
Tel +45 44 50 00 00
Fax +45 44 50 00 01

SVERIGE

Dräger Safety Sverige AB
Ögärdesvägen 19 A
433 30 Partille
Tel +46 31 340 29 00
Fax +46 31 340 29 99

NORGE

Dräger Safety Norge AS
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo
Nils Hansensvei 2, 0667 Oslo
Tel +47 41 40 24 00
Fax +47 22 64 31 99

FINLAND

Dräger Suomi Oy
Juurakkotie 3
01510 Vantaa
Tel +358 207 119 600
Fax +358 207 119 611

Locate your Regional Sales Representative at:
www.draeger.com/contact

